


FGM Tech

LuxDerma MASK

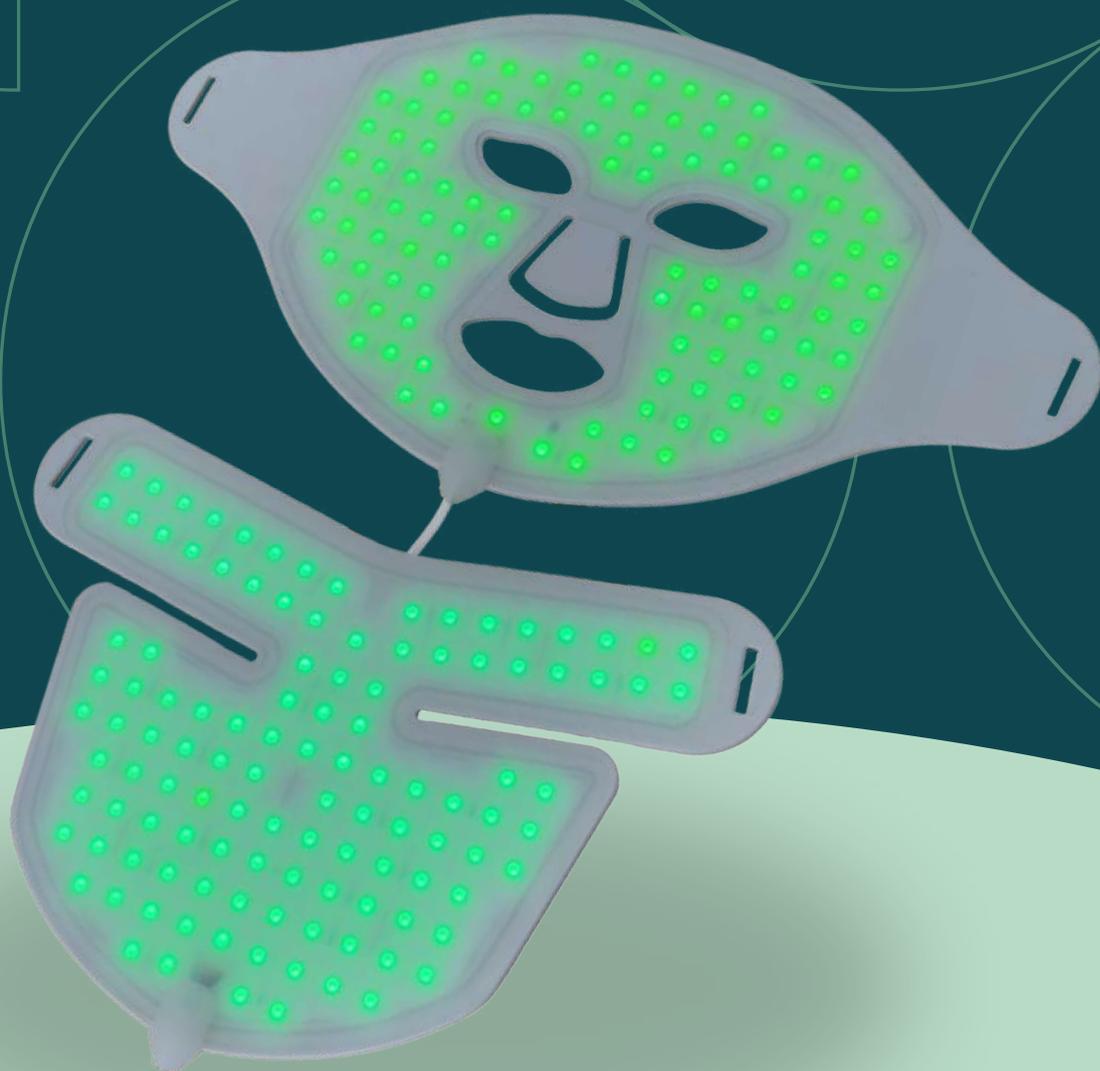

Manual de usuario

Bienvenida

Estimado cliente:

Gracias por comprar la **LuxDerma MASK**. Por favor, lea atentamente el Manual de Usuario antes de utilizarla y preste atención a las precauciones para operar y utilizar este producto correctamente.

Este manual le proporciona **métodos de operación seguros y efectivos**.

Consérvelo adecuadamente después de leerlo para futuras referencias.

Atentamente,
El equipo de **FGM Tech Laser Co.**

Índice

Descripción del dispositivo	4
Principios del producto	
Accesorios incluidos	
Uso del dispositivo	5
Instrucciones de uso	
Funciones	
Protocolos de Uso	6
Antiage, Manchas Manchas cutáneas, Bruxismo, Acné	
Confianza y seguridad certificada	
Seguridad y soporte	7
Advertencias y precauciones	
Usos prohibidos	
Garantía	

Principios del producto

La **WMA (World Medical Association)** ha confirmado que el uso de longitudes de onda específicas de luz puede mejorar la **vitalidad de las células y tejidos de la piel** mediante irradiación cercana, mejorando así la condición de la piel.

La **LuxDerma MASK** utiliza el principio de la fototerapia con nanotecnología para guiar los materiales de luz, sin generar calor elevado, y emplea luz pura de baja energía y tecnología de ajuste de luz táctil para el cuidado de la piel.

El tratamiento se caracteriza por su suavidad natural, **efectos curativos notables, bajo riesgo y ausencia de efectos secundarios**. Es un experto en el cuidado de la piel y es apto para todo tipo de piel.

Accesorios incluidos

- ✓ LuxDerma MASK - Parte Facial
- ✓ LuxDerma MASK - Parte del Cuello
- ✓ Repuestos de Ojos (1 par)
- ✓ 1 Controlador
- ✓ 2 Cierres de Velcro® para sujeción



Instrucciones de uso

1. Limpie la piel del rostro y séquela suavemente con una toalla.
2. Conecte el producto al controlador mediante la línea USB.
(Se conecta de manera individual y simultanea ambas partes cuello y rostro)
3. Encienda el botón de encendido.
4. Presione el botón de color para elegir el modo y ajuste el tiempo de uso (15-30 minutos es lo ideal).
5. Se recomienda usar el producto acostado en la cama o sofá para mayor relajación.
6. Después de su uso, retire la máscara y límpiela adecuadamente para futuros usos.



⚙️ Funciones

La **LuxDerma MASK** puede aumentar la actividad celular, promoviendo el metabolismo celular, lo que permite que la piel secrete una **gran cantidad de colágeno y tejido fibroso para su regeneración.**

Además, la LuxDerma MASK acelera el retorno venoso, **incrementa la elasticidad de la piel y mejora la clorosis y opacidad de la piel,** logrando efectos de blanqueamiento, rejuvenecimiento, antiarrugas y reparación de manchas.

Protocolos de Uso

ANTIAGE

30 minutos de luz azul
y luego 15 minutos de luz roja.
2 a 3 veces por semana.

MANCHAS CUTÁNEAS

15 minutos de luz amarilla,
2 a 3 veces por semana

BRUXISMO

15 minutos de luz verde
Todas las mañanas al despertar

ACNÉ

15 min de luz violeta y luego
15 minutos de luz azul.
2 a 3 veces por semana

Confianza y seguridad certificada

Los productos de **FGM Tech** han sido desarrollados bajo **los más altos estándares de calidad y seguridad**, y cuentan con certificaciones oficiales como **ANMAT** (Argentina) y **CE** (Unión Europea). Esto garantiza que cada dispositivo ha sido **rigurosamente testado**, ofreciendo al usuario la tranquilidad de estar utilizando tecnología aprobada, confiable y segura para el uso en el hogar. **Recomendamos siempre verificar la procedencia de los equipos**, ya que el uso de **productos no certificados** o de origen desconocido puede poner en riesgo su salud y no asegurar los resultados esperados.



Advertencias

-  Evite mirar directamente la fuente de luz.
-  Mantenga los ojos cerrados durante su uso.
-  No doblar ni presionar la máscara.
-  No sumergir en agua. Limpiar con un paño húmedo.

Usos prohibidos

-  Mujeres embarazadas
-  Niños
-  Personas con epilepsia
-  Pacientes con problemas de tiroides
-  Personas con fotosensibilidad

Garantía

Ofrecemos un año de garantía desde la fecha de compra, excluyendo daños por uso indebido o desgaste natural. Guarde el comprobante de compra para hacer valer su garantía.

Este producto ha pasado por un estricto control de calidad antes de ser enviado desde la fábrica.

Gracias por elegir nuestros productos.